令和 3 年 2 月 2021-03

# OCL Information

## 「LDH アイソザイム、ALP アイソザイム」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、ALP と LD につきましては、令和 3 年 4 月 1 日 (木) 受付日分より、JSCC 法 (JSCC: 日本臨床化学会) での検査を中止し IFCC 法 (IFCC: 国際臨床化学連合) に変更するお知らせ (2021-02) をさせていただきましたが、LDH アイソザイムと ALP アイソザイムにつきましても、令和 3 年 4 月 1 日 (木) 受付日分より IFCC 法に準拠した内容に変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

#### 対象項目

- 371 LDH アイソザイム
- 372 ALP アイソザイム

#### 変更期日

● 令和3年4月1日(木)受付日分より

#### ●LDH アイソザイム

LDHアイソザイムの測定試薬に変更はありませんが、基準値を測定試薬の添付文書記載値に変更いたします。

| 変 更 内 容    | 新                               | 旧              |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 基 準 値 (%)  | LDH1:20.0~31.0                  | LDH1:17.3~30.3 |
|            | LDH2:28.8~37.0                  | LDH2:30.0~39.7 |
|            | LDH3:21.5~27.6                  | LDH3:19.0~25.6 |
|            | LDH4: 6.3~12.4                  | LDH4: 6.2~12.3 |
|            | LDH5: 5.4~13.2                  | LDH5: 4.9~13.9 |
| 備考         | *:全血では常温保存が望まれます。長期保存の場合は-45℃以下 |                |
| (総合検査のご案内) | の保存が理想的です。                      | P.12           |

<sup>※</sup>その他検査要項に変更はございません。

### ●ALP アイソザイム


ALPアイソザイムの測定試薬を同一メーカーが販売するIFCC法に対応した試薬に変更いたします。なお、基準値を測定試薬の添付文書記載値に変更いたします。


| 変 更 内 容   | 新              | В              |
|-----------|----------------|----------------|
| 基 準 値 (%) | ALP1: 0.0∼ 5.3 | ALP1: 0.0~ 2.0 |
|           | ALP2:36.6~69.2 | ALP2:26.3~65.0 |
|           | ALP3:25.2~54.2 | ALP3:34.6~62.4 |
|           | ALP4: -        | ALP4: -        |
|           | ALP5: 0.0~18.1 | ALP5: 0.0~18.4 |
|           | ALP6: -        | ALP6: -        |
| 総合検査のご案内  | P.12           | ·              |

[ALP2]

※その他検査要項に変更はございません。

#### 《LSIメディエンス検討データ》

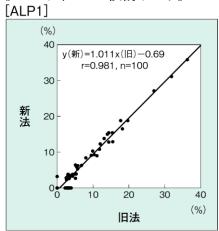

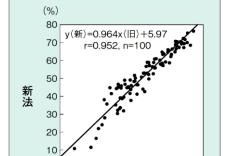

0 10 20 30 40 50 60 70 80

旧法

(%)

